

GENERAL OPHTHALMIC

Ophthalmologie Générale

Allgemeine Ophthalmologie

SG12


THORNTON FIXATION RING SMALL 13 MM

Anneau de fixation de Thornton 13 mm

Thornton Fixationsring klein 13 mm

Length : 130 mm


Handle length : 91 mm

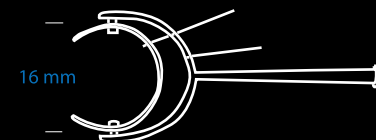

BALL TIP MUSCLE HOOK / Crochet à muscle, point boule / Schielhäkchen, ballförmige Spitze


Length : 105 mm
Handle length : 76 mm

SG32

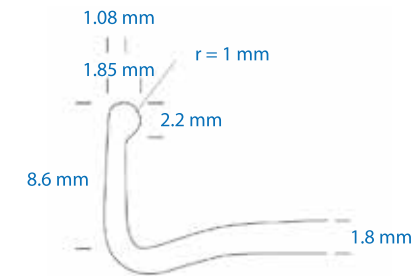
BULLDOG CLIP / Bulldog Clip / Bulldog Clip


Length : 40 mm
Handle length : 25 mm
16 mm clipping platform

SG92

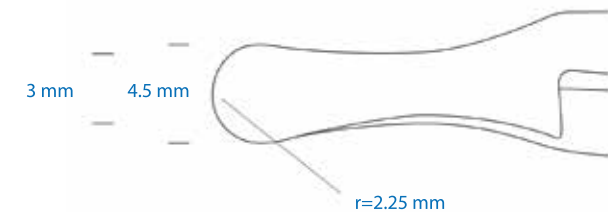
CHAVASSE HOOK / Crochet de Chavasse / Chavasse Häkchen


Length : 130 mm
Handle length : 98 mm
90° angle, curved hooked tip

SC91

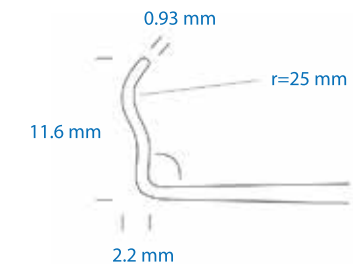
DESMARRES RETRACTOR / Rétracteur de Desmarres / Desmarres Retraktor

Length : 140 mm
Handle length : 100 mm


SG20

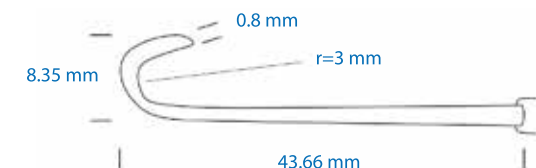

EYELID PLATE / Plaque à paupière de Jaeger / Lidplatte

Length : 90 mm
27 mm end
17 mm end


SG17

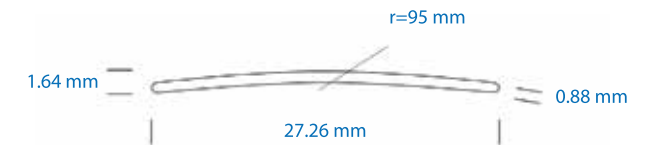

GUTHRIE HOOK / Crochet de Guthrie / Guthrie Håkchen

Length : 120 mm
Handle length: 90 mm
Two pronged hook


SG37

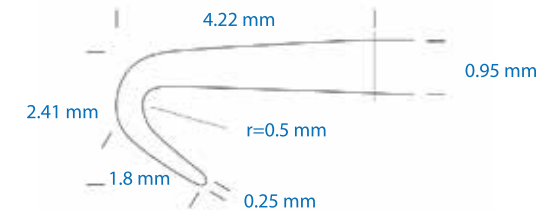

HALSTEAD MOSQUITO FORCEPS STRAIGHT / Pince de Halstead, droite / Halstead Arterienklemme, gerade

Length : 125 mm


SG33

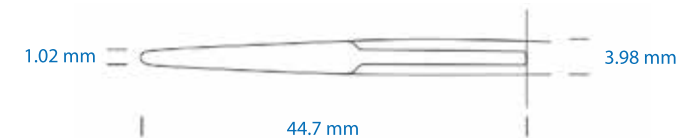

JAMESON STRABISMUS HOOK 5 MM / Crochet à strabisme de Jameson / Jameson Schielhaken

Length : 110 mm
Handle length : 83 mm
60° hook with rounded bulbous tip
Extended version 8 mm hook


SG10

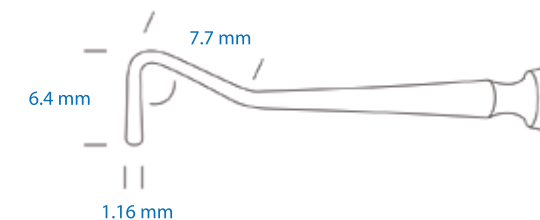

MOSQUITO FORCEPS CURVED / Pince Mosquito, courbe / Mosquito Pinzette, gebogen

Length : 125 mm
22 mm serrated clamp area

SG22

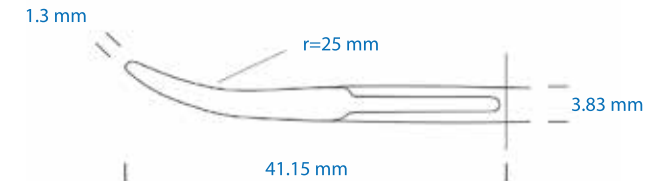
SCLERAL DEPRESSOR BULBOUS END / Dépresseur scléral / Skleral Depressor wulstige Enden


Length : 130 mm
Handle length : 92 mm
2.5 mm 10° angled bulbous end

SC23


SCLERAL DEPRESSOR DOUBLE ENDED / Dépresseur scléral double de Schocket / Skleral Depressor zweiseitig


Length : 135 mm
Handle length : 60 mm
6 mm, 2 mm hammer end,
2.5 mm 10° angled bulbous end
Double ended

SC25

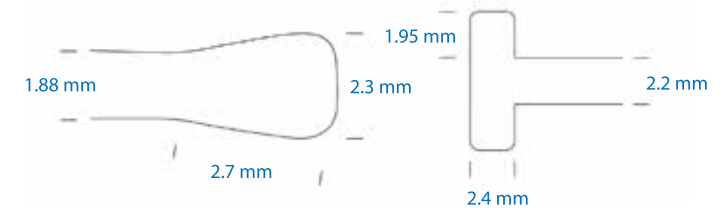
SCLERAL DEPRESSOR HAMMER END / Dépresseur scléral courbe / Skleral Depressor hammerförmiges Ende

Length : 125 mm
Handle length : 92 mm
6 mm hammer, 2 mm ends


SC24

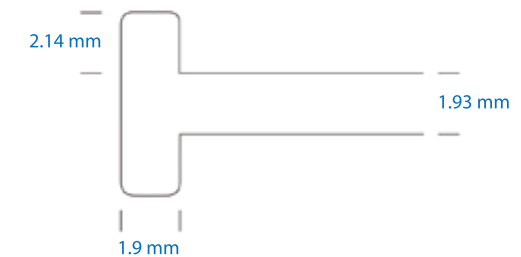

THORNTON FIXATION RING STANDARD 16 MM / Anneau de fixation de Thornton 16mm / Thornton Fixationsring standard 16 mm

Length : 135 mm
Handle length : 91 mm
swivel head 14 mm cut out


SG13

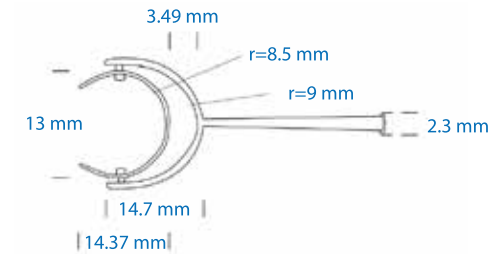

TRABECULECTOMY PUNCH / Punch à trabéculotomie / Trabekulotomie Stanze

Length : 120 mm
Handle length : 90 mm


SG03

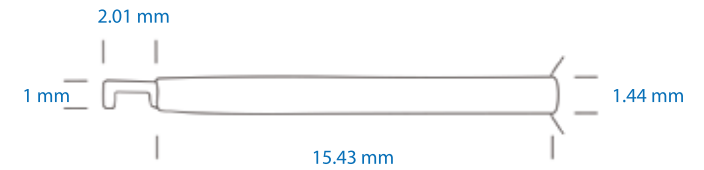

GILLIS HOOK / Crochet de Gillis / Gillis Haken

Overall length : 123 mm
Handle length : 90 mm


SG28

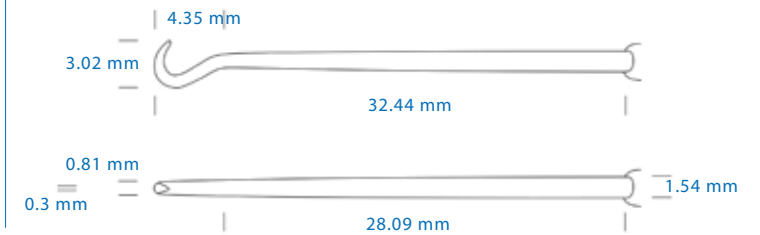

JAMESON HOOK / Crochet de Jameson, long / Jameson Haken

Overall length : 109 mm
Handle length : 83 mm

SG11

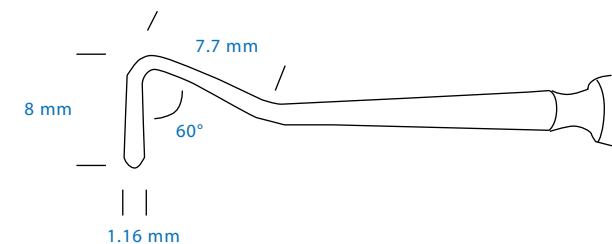





TRAN CANULA

Canule de Tran

TRAN CANULA

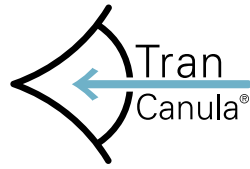

fabrinal
EYE CARE

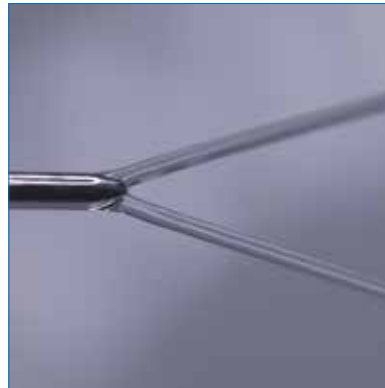



The Tran Canula® is a sterile and single use irrigation cannula used by physician in controlled environment to clear the pseudo-exfoliative particles in the anterior chamber of the eye. Unlike a conventional single jet irrigation cannula, this new instrument is characterized by two distinct water jets separated from each other by a 30° angle. Thanks to the unique design of the cannula and the laws of micro-hydrodynamics, these two independent fluid streams merge into one, more powerful, since they touch an obstacle.


TRAN CANULA®, TC- 01, SPECIFICATIONS

- Reference : TC- 01
- Cannula length : 19 mm
- Radius of curvature : 25 mm
- Outside diameter : 0.8 mm
- Design : Dr. V.T. Tran

TRAN CANULA® PACKAGING

- In a double sterile blister pack ; single use only.
- Packaging : 5 pieces
- 205 x 57 x 45 mm

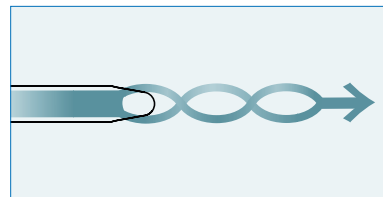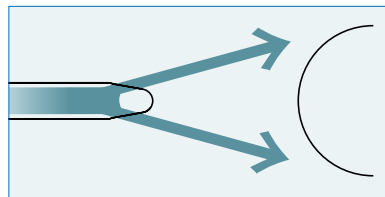

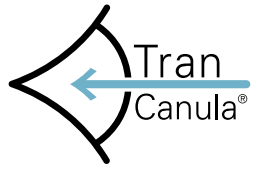

La Tran Canula® est une canule d'irrigation stérile à usage unique utilisée par le médecin dans un environnement contrôlé, pour éliminer les particules pseudo-exfoliatives déposées dans la chambre antérieure de l'œil. Contrairement à une simple canule d'irrigation à jet classique, ce nouvel instrument est caractérisé par deux jets d'eau distincts séparés l'un de l'autre par un angle de 30°. Grâce à sa conception unique et aux lois de la micro-hydrodynamique des fluides, ces deux jets indépendants fusionnent en un seul fuseau liquide, plus puissant, dès lors qu'ils touchent un obstacle.

TRAN CANULA®, TC- 01, SPÉCIFICATIONS

- Référence : TC- 01
- Longueur canule : 19 mm
- Rayon de courbure : 25 mm
- Diamètre extérieur : 0.8 mm
- Design : Dr. V.T. Tran

TRAN CANULA® PACKAGING

- Sous double blister stérile, à usage unique.
- Emballage : 5 pièces
- 205 x 57 x 45 mm

Tran Canula® ist eine sterile Einweg-Spülkanüle, die in kontrollierter Umgebung von Ärzten angewandt wird, um die pseudoexfoliativen Partikel aus der vorderen Augenkammer zu entfernen.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Einzelstrahl-Spülkanüle zeichnet sich dieses neue Instrument durch zwei getrennte Wasserstrahlen aus, die zueinander in einem Winkel von 30° stehen. Dank des einzigartigen Designs der Kanüle und aufgrund der Gesetze der Mikrohydrodynamik verschmelzen diese beiden unabhängigen Flüssigkeitsströme zu einem einzigen stärkeren, sobald sie ein Hindernis berühren.

TRAN CANULA®, TC- 01, CHARAKTERISTIKA

- Kennzeichen : TC- 01
- Kanülenlänge : 19 mm
- Krümmungsradius : 25 mm
- Aussendurchmesser : 0.8 mm
- Entwurf : Dr. V.T. Tran

TRAN CANULA® VERPACKUNG

- In einer doppelten sterilen Sichtverpackung ; zum einmaligen Gebrauch.
- Packung : 5 Stück
- 205 x 57 x 45 mm

