



Trockenes Auge – Tränenwegsverschlüsse

PARASOL[®] – dauerhafte Silikon Punctum Plugs


Garantierter Halt
30 Tage Verlustgarantie ab dem Tag des Einsetzens

- ▶ Einfache Größenanpassung ohne Messung: die Größen Klein und Mittel decken nahezu das gesamte Patientenspektrum ab
- ▶ 92 % Retention* durch sichere Verankerung
- ▶ Steril vorgeladen auf Einwegapplikator – einfache und sichere Implantation
- ▶ Problemloses Entfernen bei Bedarf
- ▶ Reduzierung des Lagerumfangs durch weniger Größen

*McCabe C. Plugs reduce Dry-Eye Symptoms, Improve Vision: Review of Ophthalmology, Nov. 2009

PARASOL[®]	verbleibende Punctum Plugs, steril vorgeladen auf einem Einweg-Injektor
Material	medizinisches Silikon
Farbe	transparent

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
A14-200	x-klein (0,25 – 0,35 mm)	2	05354139
A14-201	klein (0,35 – 0,65 mm)	2	05354151
A14-202	mittel (0,6 – 0,85 mm)	2	05354174
A14-203	groß (0,9 mm +)	2	05354197

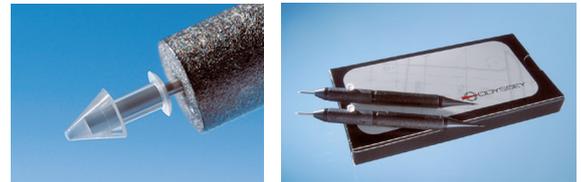


Größenvergleichstabelle	herkömmliche Plugs	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm
	PARASOL [®]	extraklein		klein		mittel		groß	

Smart Plug[™] – dauerhafte Acryl Punctum Plugs

- ▶ Der dauerhafte thermodynamische Acryl Plug passt sich den anatomischen Gegebenheiten an
- ▶ Von außen nicht sichtbar
- ▶ Keine Messungen notwendig
- ▶ Kaum spürbar: gewebefreundliches, gelartiges Material
- ▶ Keine Dilatation erforderlich

Smart Plug[™]	verbleibende Punctum Plugs, steril
Material	thermodynamisches hydrophobes Acrylpolymer
Färbung	transparent
Übergangstemperatur	32°C
Implantation	per Pinzette (empfohlen Modell 502A)

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
500-6-2	0,4 x 6 mm	2	05354211
500-9-2	0,4 x 9 mm	2	05354228

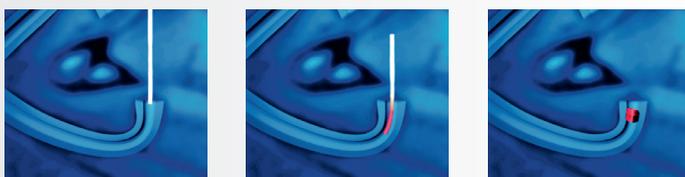

1. SMART PLUG[™] wird mit einer Pinzette bis zu zwei Drittel in den Tränenweg eingeführt.
2. Bei Körpertemperatur schrumpft SMART PLUG[™] in der Länge und dehnt sich in der Breite aus.
3. Nach ca. fünfzehn Sekunden ist der Tränenweg ausgefüllt.

Qualitätsprodukte von  VIAIMED
medical optics