





Smart Plug™ – dauerhafte Acryl Punctum Plugs


- ▶ Der dauerhafte thermodynamische Acryl Plug passt sich den anatomischen Gegebenheiten an
- ▶ Von außen nicht sichtbar
- ▶ Keine Messungen notwendig
- ▶ Kaum spürbar: gewebefreundliches, gelartiges Material
- ▶ Keine Dilatation erforderlich

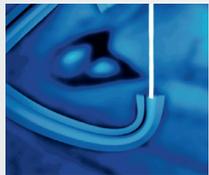

1. SMART PLUG™ wird mit einer Pinzette bis zu zwei Drittel in den Tränenweg eingeführt.

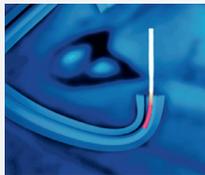

2. Bei Körpertemperatur schrumpft SMART PLUG™ in der Länge und dehnt sich in der Breite aus.

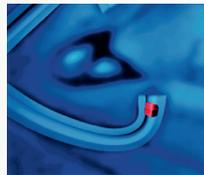

3. Nach ca. fünfzehn Sekunden ist der Tränenweg ausgefüllt.

Smart Plug™	verbleibende Punctum Plugs, steril
Material	thermodynamisches hydrophobes Acrylpolymer
Färbung	transparent
Übergangstemperatur	32°C
Implantation	per Pinzette

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
500-6-2	0,4 x 6 mm	2	05354211
500-9-2	0,4 x 9 mm	2	05354228