


OASIS Irisexpander

- Der Oasis Irisexpander erweitert schonend kleine und unvollständig dilatierte Pupillen und erlaubt eine uneingeschränkte Sicht während des chirurgischen Eingriffs
- Die vier Andockstellen umranden sanft das empfindliche Irisgewebe ohne dieses einzuklemmen oder zu verzerren
- Nach dem Entfernen erhält die Iris ihre ursprüngliche Form und Funktion vollständig zurück
- Der Einsatz des Expanders ist in Fällen, in denen Miosis und Intraoperatives Floppy Iris Syndrom (IFIS) vorhanden ist, angezeigt

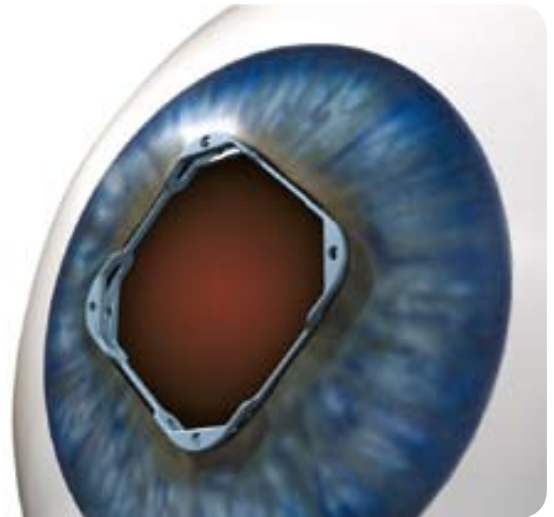

OASIS Iris Expander

Material	Polypropylen
Größen	7,0 mm, Art.-Nr. 9700
	6,25 mm, Art.-Nr. 9625
Lieferform	1 VE enthält 5 Stück, steril, vorgeladen auf einem Einweginjektor
Implantationsinstrument	8-04415 Rhein Medical® Iris Expander Manipulator

