


## Miniaturfäse CR

---

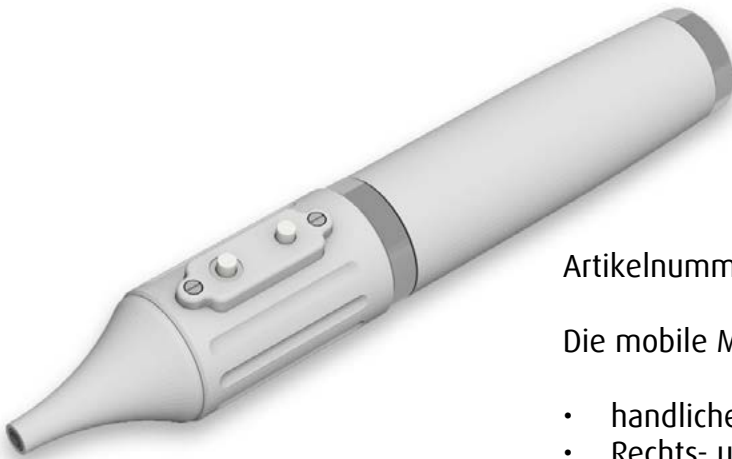

Artikelnummer: CR2015

Die mobile Miniaturfäse CR hat folgende Merkmale:

- handliches und leichtes Metallgehäuse
- Rechts- und Links-Lauf
- wird mit Li-ion-Akku Typ AA mit 3,6VDC betrieben

Die Miniaturfäse CR ist ein ergonomisches Präzisionswerkzeug für die Aufnahme von rotatorischen Fräsern in den Abmessungen Ø2,35x 25mm.

Das Gerät verfügt über einen Li-ion Akku und ist vorgeladen. Vor der Erstinbetriebnahme ist der Akku im mitgelieferten USB-Ladegerät zu laden. Die Fräse darf zum Ladevorgang nur hinten geöffnet werden.

Die Miniaturfäse ist kombinierbar mit unseren Einweg-Corneafräsern unter [www.salensa.de](http://www.salensa.de) > Augenheilkunde > Verbrauchsartikel > Corneafräser

---

### Technische Daten

Umgebungstemperatur:	+5°C... +40°C
Relative Luftfeuchte:	30%... 75%, keine Kondensation
Luftdruck:	700hPa... 1060hPa
Nennspannung:	3,7V DC ±10%
Leistungsaufnahme:	max. 2VA
DC-Motor:	3VDC/ 500mA
Nenndrehzahl:	3000min <sup>-1</sup>
Abmessungen:	D21,5x 135mm
Eigenmasse Gerät:	300g
Typenbezeichnung:	Miniaturfäse CR
Typennummer:	CR-140

---